


## SIL G

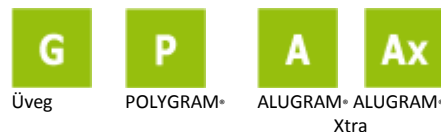

### Módosíthatlan standard szilika rétegek TLC-hez

#### Jellemzők

- Szilika 60, fajlagos felület (BET) ~ 500 m<sup>2</sup>/g, pórus méret 60 Å, fajlagos pórustérfogat 0.75 mL/g, részecske méret 5–17 µm; standard minőség
- Rétegvastagság: analitikai lapok: 0.25 mm, **preparatív lapok** 0.5, 1 mm, 2 mm
- UV aktív (254 nm) fluoreszcens indikátorral
- Kötőanyag: Magas polimerizáltságú, stabil majdnem az összes szerves oldószerre, rezisztens a vizualizáló reagensekre
- A kötőrendszer **POLYGRAM®** lapoknál teljesen stabil vizes eluensekre.
- Alugram Xtra** lapok: kiemelkedő nedvesíthetőséggel, teljesen stabil vizes eluensekkel és detektáló reagensekkel
- Kiváló elválasztási hatékonyság reprodukálhatóság sarzsról sarzra
- Az alumínium és műanyag lapok könnyű és megbízható vágása a speciális kötőrendszernek köszönhetően

• **Applikációért** látogasson el honlapunkra [www.mn-net.com](http://www.mn-net.com)

### Különböző hordozók a használatra kész rétegekhez

	Üveg lapok	POLYGRAM®	ALUGRAM® ALUGRAM® Xtra
<b>Hordozó anyagok fizikai jellemzői</b>			
Anyag	üveg	poliészter	alumínium
Vastagság	1.3 mm	0.2 mm	0.15 mm
Csomag tömege és tárolási igények	magas	alacsony	alacsony
Réteg stabilitás mechanikus hatásra	ideális	alacsony	relatív magas
Hőmérséklet stabilitás	magas	max. 185 °C	magas
Törésérzékenység	igen	nem	nem
Ollóval vágható	nem	igen	igen
<b>Hordozó anyag kémiai ellenálló képessége</b>			
oldószerrel szemben	magas	magas	magas
ásványi savak és koncentrált ammóniával szemben	magas	magas	alacsony
<b>NP lapok kötőanyag stabilitása vízben</b>			
alkalmasság vizes detektáló reagensekhez	fázistól függően	nagyon alkalmas	korlátozottan alkalmas

### Akciós Árak 2013. December 31-ig!

Rendelési kód	Megnevezés és méret	Kíszerelési egység lap/doboz	Nettó ár Ft
818233	ALUGRAM Xtra SIL G/, 20x20 cm	25	19.000,-
818333	ALUGRAM Xtra SIL G/UV254, 20x20 cm	25	19.000,-
818261	ALUGRAM Xtra SIL G, 5x10 cm	50	14.800,-
818360	ALUGRAM Xtra SIL G/UV254, 5x10 cm	50	14.800,-

Reanal Laborvegyszer Kft.  
 Cím: 1147 Budapest, Telepes u. 53.  
 Postacím: 1441 Budapest, Pf. 54.

Telefon: (1) 467-7524  
 Fax: (1) 467-7535  
 E-mail: [reanal-labor@reanal-labor.hu](mailto:reanal-labor@reanal-labor.hu)

805023	POLYGRAM SIL G UV254, 20x20 cm	25	18.000,-
805013	POLYGRAM SIL G , 20x20 cm	25	18.000,-
805021	POLYGRAM SIL G UV254, 4x8 cm	50	8.600,-
809013	DC-Platten SIL G-25 , 20x20	25	31.400,-
809023	DC-Platten SIL G-25 UV254, 20x20	25	31.400,-
809012	DC-Platten SIL G-25 , 10x20	50	36.200,-
809022	DC-Platten SIL G-25 UV254, 10x20	50	36.200,-
809017	DC-Platten SIL G-25, 5x10	50	16.000,-
809027	DC-Platten SIL G-25 UV254, 5x10	50	16.000,-

### Preparatív lapok

809053	DC-Platten SIL G-50, 20x20	20	38.000,-
809051	DC-Platten SIL G-50 UV254, 20x20	20	56.000,-
809061	DC-Platten SIL G-100, 20x20	15	48.000,-
809063	DC-Platten SIL G-100 UV254, 20x20	15	62.000,-
809073	DC-Platten SIL G-200, 20x20	12	38.000,-
809083	DC-Platten SIL G-200 UV254, 20x20	12	52.000,-

### Akciós Árak 2013. December 31-ig!





**Reanal Laborvegyszer Kft.**

**Cím:** 1147 Budapest, Telepes u. 53.

**Postacím:** 1441 Budapest, Pf. 54.

**Telefon:** (1) 467-7524

**Fax:** (1) 467-7535

**E-mail:** [reanal-labor@reanal-labor.hu](mailto:reanal-labor@reanal-labor.hu)